


臨床醫囑真實流向圖

VN-BECS V2.0 系統整合流程

DOCUMENT: 臨床用血與配血醫囑

STATUS: **APPROVED**

REF: SOP 07 / SOP 10 / AABB 規範

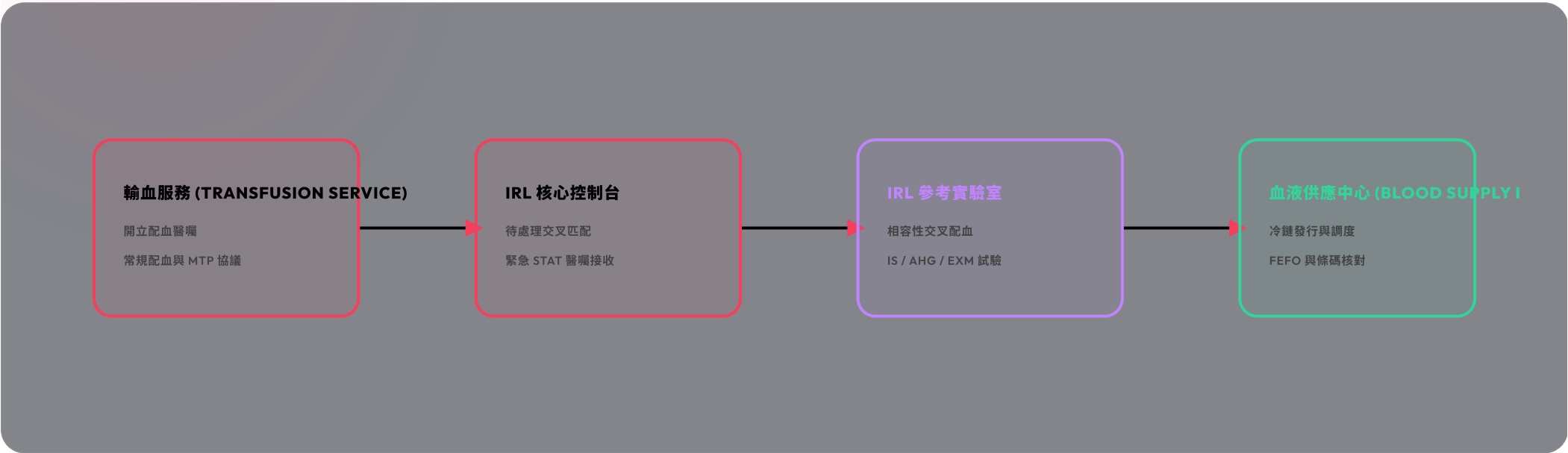

步驟	所屬子系統 / 整合功能	醫囑開立與相容性試驗邏輯說明
01	輸血服務 (Transfusion Service) - 子系統	醫囑開立與緊急大量輸血申請 醫師在「輸血服務 (Transfusion Service)」子系統中，為特定病患開立用血醫囑。可選擇常規交叉配血，或針對大失血病患一鍵啟動「大量輸血協定 (MTP)」緊急免交叉配血放行流程。
02	免疫血液學與參考實驗室 (IRL) - 子系統	醫囑即時介接與控制台警報

步驟	所屬子系統 / 整合功能	醫囑開立與相容性試驗邏輯說明
01	血液供應中心 (Blood Supply Hub) - 子系統	臨床用血請求會即時拋接至 IRL 核心控制台。常規配血醫囑自動排入「待處理交叉匹配 (Crossmatch)」；而緊急 MTP 醫囑則會同步在「緊急臨床血袋申請」看板中觸發紅色高危警示，指引醫檢師優先處理。
03	免疫血液學與參考實驗室 (IRL) - 配血節點	相容性配對與臨床防呆驗證 醫檢師自系統讀取病患病歷號碼 (MRN) 與不規則抗體史。系統強制執行防呆：對無抗體史病患採用電子交叉配血 (EXM)，對有抗體史或輸血反應史病患強制執行實體血清學 (IS 即時離心 / AHG 抗球蛋白) 交叉配血。
04	血液供應中心 (Blood Supply Hub) - 子系統	冷鏈物料調度與 FEFO 揀貨 交叉配血相容放行後，「血液供應中心 (Blood Supply Hub)」接收發行指令。執行 FEFO（先進先出，優先發行效期短者）演算法進行自動揀貨，並在物聯網全程低溫冷鏈監控下，將血袋發行配送至醫院。