


血袋真實流向圖

VN-BECS V2.0 系統整合流程

DOCUMENT: 血液品管與庫存追溯程序

STATUS: **APPROVED**

REF: SOP 03 / SOP 08 / ISBT-128 規範

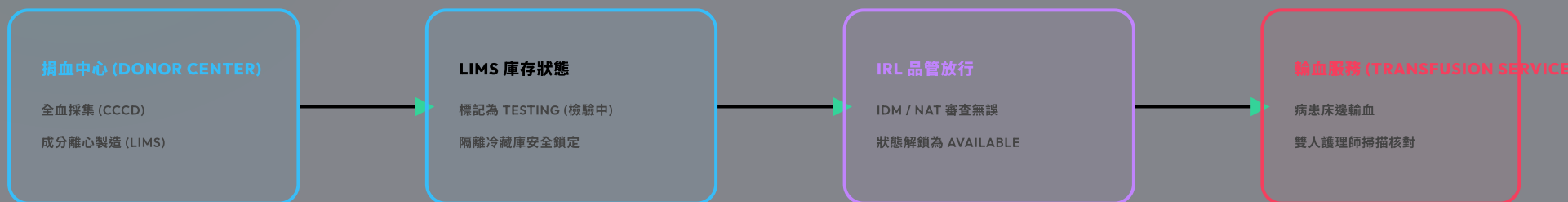

步驟	所屬子系統 / 整合功能	血袋流向與資料庫庫存狀態判定邏輯
01	捐血中心 (Donor Center) - 子系統	採血與成分分離製造 從捐血人採集全血後，在「捐血中心 (Donor Center)」子系統進行高速離心製造，將全血分離為紅血球、血小板、血漿等成分血品，在同一個捐血號碼 (DIN) 下產生獨立的成分品項條碼。
02	LIMS 隔離庫存判定	安全隔離儲存與 TESTING 狀態鎖定

步驟	所屬子系統 / 整合功能	
		血袋流向與資料庫庫存狀態判定邏輯
		製造完成的成分血品被置入指定的隔離冷藏庫。資料庫嚴格將其庫存狀態指派為「TESTING」(檢驗中)。在此狀態下，系統完全防呆鎖定，嚴禁進行任何揀貨、調度或發行出庫。
03	免疫血液學與參考實驗室 (IRL) - 子系統	品管審查放行與 AVAILABLE 狀態變更 核心實驗室完成對該捐血號碼的所有傳染病篩檢 (IDM/NAT) 與血型鑑定。醫檢師執行「品管放行」後，系統後台連動，自動將該袋血的狀態由 TESTING 變更為 AVAILABLE (可用庫存)。
04	血液供應中心 (Blood Supply Hub) → 輸血服務 (Transfusion Service)	FEFO 庫存調度、冷鏈運輸與床邊雙核對 「血液供應中心 (Blood Supply Hub)」執行 FEFO 揀貨演算法，包裝血袋並透過物聯網冷鏈運送達醫院。醫院的「輸血服務 (Transfusion Service)」接收簽收後，在輸血前由雙護理師在病患床邊進行 ISBT-128 條碼雙重掃描，以確保 100% 輸血相容與安全。