


檢體真實流向圖

VN-BECS V2.0 系統整合流程

DOCUMENT: 檢體處理程序

STATUS: **APPROVED**

REF: SOP 02 / SOP 08 / SOP 11 規範

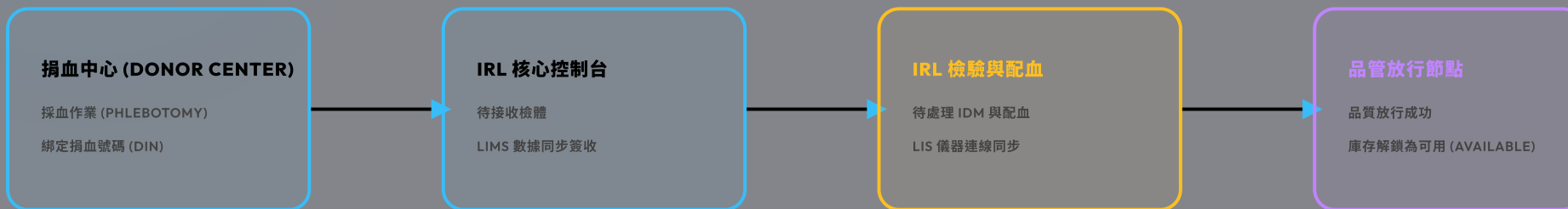

步驟	所屬子系統 / 整合功能	臨床作業流程與防呆校驗邏輯
01	捐血中心 (Donor Center) - 子系統	採集作業與檢體 DIN 綁定 當採血小組完成捐血人血液採集後，立即使用 ISBT-128 國際標準條碼（DIN，捐血號碼）綁定血袋與檢體管。系統將自動向核心實驗室發送檢體預報資訊。
02	免疫血液學與參考實驗室 (IRL) - 子系統	檢體簽收與控制台自動分流

步驟	所屬子系統 / 整合功能	臨床作業流程與防呆校驗邏輯
		檢體管送達核心實驗室。控制台自動將其標記為「待接收檢體」。經醫檢師確認簽收後，系統會將其自動分派至兩個平行佇列：「待處理 IDM 篩查」與「待處理交叉匹配」。
03	自動化檢驗儀器連線 (LIS) - 整合功能	儀器化驗與 LIS 數據自動同步 檢體管送入全自動化生化與核酸分析儀 (如 cobas 6800、ARCHITECT)。系統自動化同步儀器所產生的 HIV、HBV、HCV、NAT 與血清學化驗結果，並存入 BECS 資料庫中。
04	品管放行節點 (QA Node) - 功能模組	終端品管審核與庫存狀態解鎖 在確認所有 IDM/NAT 檢驗陰性、血型判定無誤且交叉配血相容後，醫檢師點擊放行。系統將該捐血號碼對應的實體血袋在「血液供應中心 (Blood Supply Hub)」中，由檢驗中 (TESTING) 解鎖為可用庫存 (AVAILABLE)。